


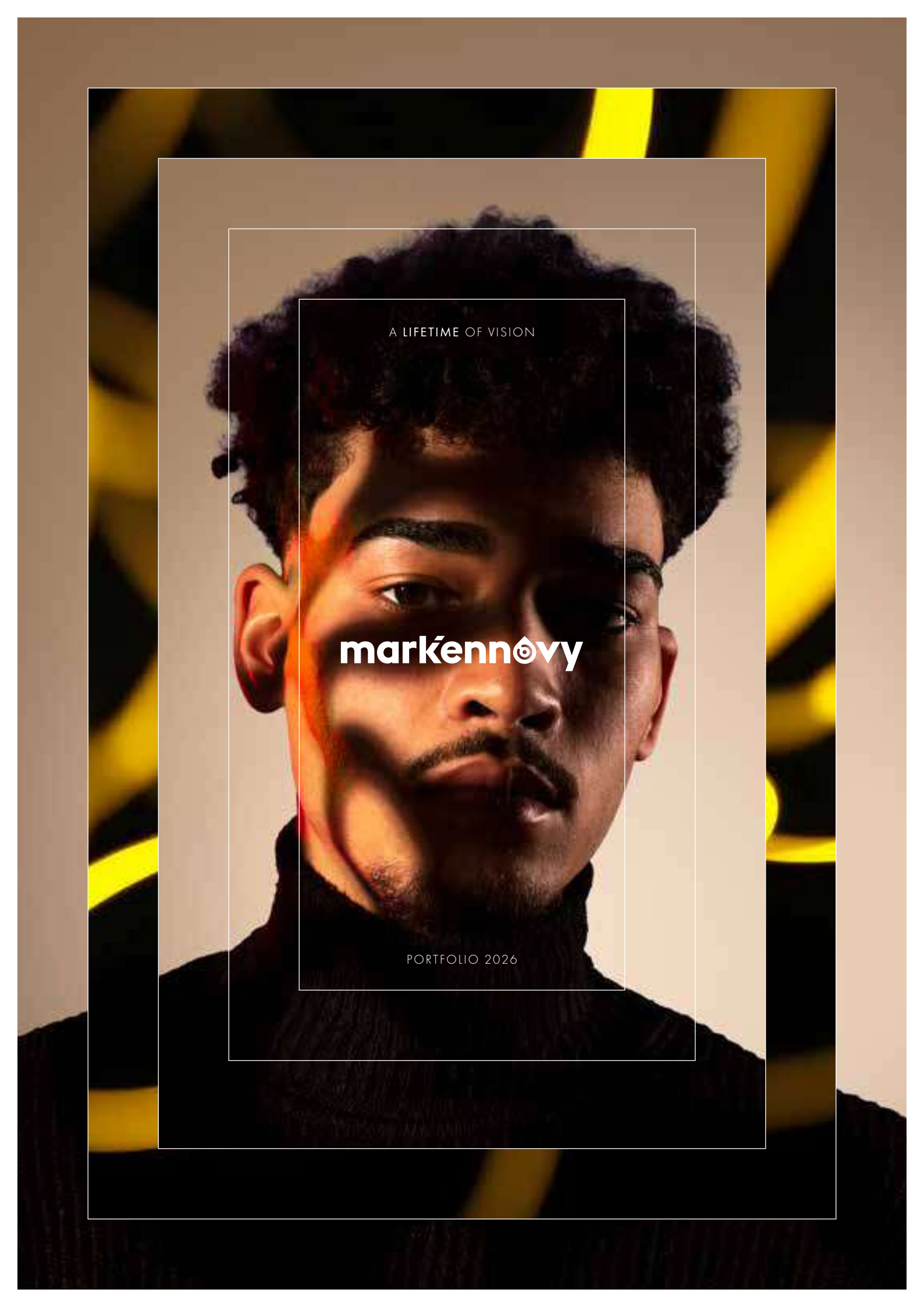

A LIFETIME OF VISION

markénnovy

PORTFOLIO 2026

WARUM PERSONALISIERUNG



DIE REISE DES SEHENS

Rising | Performance | Prime



PARTNERSCHAFTSLÖSUNGEN

ES GEHT UM MEHR, ALS LINSENPARAMETER

Personalisierung definiert neu, was Exzellenz bedeutet

Es ist die Kombination aus Technologien, fachkundiger Unterstützung und Partnerschaft, die es ermöglicht, bessere Ergebnisse zu erzielen und dauerhaftes Vertrauen in Ihr Geschäft aufzubauen.

Wenn Ansprüche an
das Sehen individuell
betrachtet werden

Ist die Versorgung
außergewöhnlich



Maßgeschneiderte Versorgung

Kontaktlinsen, die auf jedes Auge und jeden Lebensstil zugeschnitten sind.

Umfassende Lösungen

Produkte und Support, die darauf ausgelegt sind, den Standard der Versorgung zu erhöhen.

Fachkundige Unterstützung

Leidenschaftliche Fachleute, die Ihnen bei jeder Anpassung beratend und unterstützend zur Seite stehen.

Weiterbildung, die stärkt

Schulungen, Einblicke und praktische Anleitungen für eine personalisierte Anpassung.

Technologie, die zählt

Innovation in der Produktion, im Produktdesign und in der Anpassung.

Professionelle Ausrichtung

Ausgerichtet auf die Anforderungen von Augenärzten und Optikern.

Stolzes Mitglied der Euclid Vision Group Familie

EUCLID VISION
GROUP



A lifetime of vision

Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Auge und jede Lebensphase

ALTER | $\geq 6 - 25$

Rising

BE THE STAR

MYOPIE-VERSORGUNG UND GESUNDES AUGENWACHSTUM

ALTER | ≤ 40

PERFORMANCE

FOR THE RHYTHM OF TODAY

AKTIVER UND DIGITALER LEBENSSTIL

ALTER | $+40$

PRIME

STAY AT YOUR BEST

LÖSUNGEN FÜR PRESBYOPE KUNDEN

DIE REISE DES SEHENS



Be The **Rising** Star

JEDER KUNDE

Day



MEHR ALS EINE SEHKORREKTUR

Eine Myopie-Lösung für jeden Kunden

Wenn Kurzsichtigkeit auftritt, können
frühzeitige Entscheidungen die lebenslange
Augengesundheit beeinflussen.



Night

IST EINZIGARTIG



Individuelle Versorgung von Anfang an

Mit dem umfassenden Myopie-Portfolio von mark’ennovy können Sie Ihre Versorgung individuell auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen abstimmen – heute und während er wächst

UMFASSENDE LÖSUNG, VOLLSTÄNDIGES VERTRAUEN

TAGESLINSE

SiHy | 10PK • 30PK • 90PK



Technologie vom | BHVI

be free Day

Für junge Kurzsichtige mit aktivem Lebensstil, die von täglichem Austausch, minimaler Linsenpflege und höherer Sauerstoffdurchlässigkeit profitieren.

UV Filter	Klasse 2
Basiskurven (mm)	8.50
Durchmesser (mm)	14.20
Stärkenbereich (dpt)	-0.50 bis -6.00 (0.25)

MONATSLINSE

SiHy | 3PK • 6PK



Technologie vom | BHVI

MYLO

Für Kinder und Jugendliche mit fortschreitender Kurzsichtigkeit, einschließlich Astigmatismus $\geq -0,75\text{dpt}$, die von einer höheren Sauerstoffdurchlässigkeit und einer individuellen Passform profitieren.

UV Filter	Klasse 1
Basiskurven (mm)	7.10 bis 9.80 (0.30)
Durchmesser (mm)	13.50 bis 15.50 (0.50)
Sphären (dpt)	-0.25 bis -15.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
Achsen (°)	In 1° Schritten

ORTHO-K

Formstabil | 1PK



Design mit | MyEuclid

MYLO Night

Für Träger mit leichter bis mittlerer Kurzsichtigkeit und/oder Astigmatismus, die eine Korrektur über Nacht und die Freiheit von Kontaktlinsen und Brillen bevorzugen.

Basiskurven (mm)	6.50 bis 10.00
Durchmesser (mm)	10.20 bis 11.20 (0.10)
Durchmesser der Optischen Zone (mm)	5.00, 5.50, 6.00, 6.60
Scheitelbrechwert (dpt)	+0,50

Kunden	Myopie $\leq 5.00\text{ dpt}$ Hornhaut-Astigmatismus $\leq 1.50\text{ dpt}$
--------	--



MODERNER LIFESTYLE

PERFORMANCE

FOR THE RHYTHM OF TODAY

ARBEIT, BILDSCHIRM, BEWEGUNG...

Dies ist die Phase, in der sich das Leben beschleunigt.
Passen Sie sich genauso schnell an, wie Ihre Kunden.



Entwickelt für ständige Bewegung

Bieten Sie Schärfe, Stabilität und Komfort, die sich genauso schnell anpassen wie Ihre Kunden, damit diese von morgens bis abends sicher und komfortabel sehen können.

PRÄZISION, DIE MITHALTEN KANN

MONATSLINSE

SiHy | Alle Geometrien | 3PK • 6PK



SAPHIR^{RX}

Der Alleskönner für Kunden mit mittlerem bis starkem Astigmatismus, die von einer höheren Sauerstoffdurchlässigkeit und UV-Schutz der Klasse 1 profitieren.

UV Filter	Klasse 1
Basiskurven (mm)	6.80 bis 9.80 (0.30)
Durchmesser (mm)	13.00 bis 16.00 (0.50)
Sphären (dpt)	±30.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
Achsen (°)	In 1° Schritten
Additionen (dpt)	0.50 bis 4.00 (0.50) CD / CN

MONATSLINSE

Hydrogel | Alle Geometrien | 3PK • 6PK



GENTLE⁵⁹

Für Kunden, die zuverlässigen Komfort, einfache Handhabung und eine Linse suchen, die speziell für Trockenheitssymptome entwickelt wurde.

Basiskurven (mm)	7.10 bis 9.80 (0.30)
Durchmesser (mm)	13.00 bis 16.00 (0.50)
Sphären (dpt)	±30.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
Achsen (°)	In 1° Schritten
Additionen (dpt)	0.50 bis 4.00 (0.50) CD / CN

MONATSLINSE

SiHy | Alle Geometrien | 3PK • 6PK



Blaulichtfilter

BLU:GEN

Für Kunden, die viel am Bildschirm oder im Tageslicht arbeiten und von einem selektiven Blaulichtfilter und UV-Schutz der Klasse 1 profitieren.

UV Filter	Klasse 1
Basiskurven (mm)	6.50 bis 9.80 (0.30)
Durchmesser (mm)	11.50 bis 16.50 (0.50)
Sphären (dpt)	±30.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
Achsen (°)	In 1° Schritten
Additionen (dpt)	0.50 bis 4.00 (0.50) CD / CN

MONATSLINSE

Hydrogel | Alle Geometrien | 3PK • 6PK



GENTLE⁸⁰

Für besonders empfindliche Augen, die höchste Ansprüche an Komfort und Benetzung stellen.

Basiskurven (mm)	7.10 bis 9.80 (0.30)
Durchmesser (mm)	13.00 bis 16.00 (0.50)
Sphären (dpt)	±30.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
Achsen (°)	In 1° Schritten
Additionen (dpt)	0.50 bis 4.00 (0.50) CD / CN



MIT DER ZEIT GEHEN

PRIME

STAY AT YOUR BEST

EIN KLARER WEG IN DIE ZUKUNFT

Da sich die Sehbedürfnisse weiterentwickeln, wird die Personalisierung immer wichtiger. Die Zeit bleibt nicht stehen – Scharfes Sehen sollte das auch nicht.



Von der Ausnahme zur Erwartung

Astigmatismus, unterschiedliche Hornhautprofile und individuelle Lebensumstände – bieten Sie maßgeschneiderte Versorgung und bauen Sie gleichzeitig eine starke Kundenbindung auf.

DAS AUßERGEWÖHNLICHE WIRD ZUR NORM

MONATSLINSE

SiHy | EDOF + EDOF Torisch | 3PK • 6PK



Technologie vom |  BHVI

EDOF

Für Kunden mit beginnender bis mäßiger Presbyopie, die von einer hohen Sauerstoffdurchlässigkeit und UV-Schutz der Klasse 1 profitieren.

UV Filter	Klasse 1
Basiskurven (mm)	7.10 bis 9.80 (0.30)
Durchmesser (mm)	13.50 bis 15.50 (0.50)
Sphären (dpt)	±18.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
Achsen (°)	In 1° Schritten
Additionen (dpt)	0.75 1.50 2.25

MONATSLINSE

Hydrogel | EDOF + EDOF Torisch | 3PK • 6PK



Technologie vom |  BHVI

EDOF 59

Für Kunden mit beginnender bis mäßiger Presbyopie, die zu Trockenheitssymptomen neigen und von zuverlässigem Komfort und einfacher Handhabung profitieren würden.

Basiskurven (mm)	7.10 bis 9.80 (0.30)
Durchmesser (mm)	13.50 bis 15.50 (0.50)
Sphären (dpt)	-18.00 bis +10.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
Achsen (°)	In 1° Schritten
Additionen (dpt)	0.75 1.50 2.25

BENÖTIGEN SIE EINE LÖSUNG

Für höchste Ansprüche an die Nahsicht?

KOMBINIEREN SIE DAS TRADITIONELLE
MULTIFOKALE CD UND CN DESIGN

Für manchen Kunden könnte die Kombination der Vorteile von EDOF und Saphir RX – oder EDOF 59 und Gentle 59 – die beste Lösung für die Nahsicht sein.

SAPHIR^{RX}

Für Träger mit Nahsichtbedarf und einem Lebensstil, bei dem Nah- bis Mittelsicht im Vordergrund steht.

BLU:GEN

Für Träger mit Nahsichtbedarf, die Wert auf Nahsicht und die Nutzung digitaler Geräte legen.

GENTLE⁵⁹

Für Träger mit Nahsichtbedarf, die Trockenheitssymptome aufweisen.

GENTLE⁸⁰

Für Träger mit mittleren bis fortgeschrittenen Anforderungen an die Nahsicht, die höchste Ansprüche an Komfort und Benetzung stellen.

Wir stärken Sie durch Partnerschaft

Manchmal reicht ein umfassendes Portfolio an Kontaktlinsen
nicht aus, um erfolgreiche Kundenergebnisse zu erzielen.

mark'ennovy  medmont DISOP

Gemeinsam unterstützen Sie Mark'ennovy, Medmont und Disop mit einem breiten
Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Innovationen – damit Sie jeden Kunden
ganz nach seinem Bedarf und ohne Kompromisse versorgen können.

Proud members of the Euclid Vision Group family

EUCLID VISION
G R O U P

KOMBILÖSUNG

Normaler Gebrauch | Weiche Linsen



**TÄGLICHE REINIGUNG UND
FEUCHTIGKEITSPFLEGE IN EINEM SCHRITT**

Standard (360 ml) | Travel (60ml)

PEROXID SYSTEM

Maximale Desinfektion | Alle Linsen*



ULTRA-SCHNELLER PROZESS (1 STUNDE) IN EINEM SCHRITT

Standard (360 ml) | Travel (60ml)

*Ergänzende Pflegeprodukte, empfohlen für Ortho-K- und
Sklerallinsen (Enzymtabletten und Oberflächenreiniger).

KOCHSALZLÖSUNG


Abspülen | Alle Linsen



NEUE FORMEL FÜR EFFEKTIVES ABSPÜLEN

Standard (360 ml)

**CRAFTED
WITH CARE
FOR YOU**

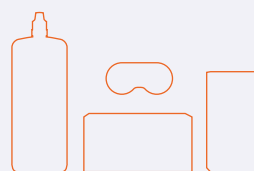

2x MONATSLINSEN (3PK) **3x** KONTAKTLINSENPFLEGEMITTEL (250ML) **1x** BENETZUNGSLÖSUNG (10ML)

KONTAKTLINSEN: MYLO, EDOF, EDOF 59, Saphir Rx, Blu:gen, Gentle 59, Gentle 80 | **PFLEGEMITTEL:** Kombilösung | **AUGENPFLEGE:** Nachbenetzer

CARE PACK

Der Erfolg liegt im
Kundenerlebnis

3-MONATS-PACK



Effizientere Versorgung. Zufriedenere Kunden

Care Pack ist ein Service, der die Versorgung vereinfachen und das Kundenerlebnis verbessern soll: Eine Versorgung, die alles Notwendige für die Pflege der Kontaktlinsen umfasst und zuverlässigen Komfort gewährleistet.

FÜR PERFEKTE KUNDENBINDUNG



Mehr sehen. Intelligenter anpassen

Von topografischen Messungen bis hin zum cloudbasierten Management – in einem intuitiven Arbeitsablauf.



medmont meridia™ Vantage
CORNEAL-TOPOGRAPHIE UND SKLERAL-TOPOGRAPHIE

MEHR VERTRAUEN. SCHNELLERE ANPASSUNGEN. BESSERE ERGEBNISSE.

Individuelle Versorgung leicht gemacht

Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Außendienst, um weitere Informationen zu unseren medmont Geräten zu erhalten.



medmont meridia™ Pro
CORNEAL-TOPOGRAPHIE

EINFACHE 3-SCHRITTE-ANPASSANLEITUNG

Für die individuell gefertigten weichen Kontaktlinsen von mark'ennovy

01. PATIENTENDATEN ERFASSEN

HVID

(Horizontal sichtbarer Irisdurchmesser)

Hornhautradien & aktuelle Refraktion

(maximale Pluswerte für die Ferne)

Exzentrizität* (optional)

Beschreibt die Hornhautabflachung vom Zentrum zur Peripherie

02. BERECHNEN SIE DIE KONTAKTLINSE

Empfohlen:

Loggen Sie sich auf myennovy ein und geben alle Messdaten des Kunden in den Online-Kontaktlinsen-Kalkulator ein.

Alternative:

Linsendurchmesser: *HVID +3mm | HSA berücksichtigen und Stärke entsprechend umrechnen

*HVID + 2.50 mm kann als Alternative verwendet werden, wenn ein kleinerer Linsendurchmesser bevorzugt wird

Die HSA-Umrechnung immer auf beide Hauptschnitte anwenden
Der Online-Kontaktlinsen-Kalkulator berechnet dies automatisch (empfohlene Methode)

03. LINSENSITZ BEURTEILEN

3A. Nach 20 Minuten Tragezeit

Beurteilen Sie den Sitz der Linse. Prüfen Sie, ob Durchmesser, Zentrierung und Bewegung korrekt sind | Während der Eingewöhnungszeit mit MYLO- und EDOF-Linsen kann es im Vergleich zur Brille zu einer leichten Verschlechterung der Sehschärfe (VA) kommen, die sich jedoch mit fortschreitender Adaptation verbessern sollte | Wenn die Linse um 30 Grad oder mehr rotiert, kontaktieren Sie den technischen Support, da BC/Ø möglicherweise angepasst werden müssen.

3B. Überprüfen Sie die monokulare und binokulare Sehschärfe (VA) für alle Entfernungen.

Akzeptabler Visus & Sitz:
Abgabe der Probelinsen

Unzureichender Visus & Sitz:
Customer Care kontaktieren

3C. Überprüfen Sie erneut den Visus (VA) und das Verhalten am Auge nach 1 Woche.

Akzeptabler Visus & Sitz:
Verkaufsboxen bestellen

Unzureichender Visus & Sitz:
Customer Care kontaktieren

Bei torischen Anpassungen sollte die Markierung der Linse nach der Achsenanpassung in der gleichen Position bleiben.
Stellen Sie sicher, dass der Kunde seine Linsen am Tag des Nachsorgetermins trägt.

ANPASSREGELN FÜR EIN DURCHSCHNITTLICHES AUGE (EXZENTRIZITÄT 0.45)

Nicht alle Kombinationen aus Basiskurve und Durchmesser sind für alle in den untenstehenden Tabellen aufgeführten Marken verfügbar

CL DIA wird berechnet, indem 3 mm oder 2.5 mm zu HVID addiert werden

HVID	9.00	9.50	10.00	10.50	11.00	11.50	12.00	12.50	13.00	13.50
CL DIA +3mm	12.00	12.50	13.00	13.50	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00	16.50
CL DIA +2,5mm	11.50	12.00	12.50	13.00	13.50	14.00	14.50	15.00	15.50	16.00

SAPHIR RX | MYLO | EDOF | BLU:GEN

CL DIA \ BC	7,10	7,15	7,20	7,25	7,30	7,35	7,40	7,45	7,50	7,55	7,60	7,65	7,70	7,75	7,80	7,85	7,90	7,95	8,00	8,05	8,10	8,15	8,20	8,25	8,30	8,35	8,40	8,45
11.50	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
12.00	6,80	6,80	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	8,00	8,00
12.50	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
13.00	7,10	7,10	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30
13.50	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
14.00	7,40	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
14.50	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,90
15.00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
15.50	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	9,20	9,20	9,20	9,20
16.00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,50	9,50
16.50	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50

GENTLE 59 | EDOF 59

CL DIA \ BC	7,10	7,15	7,20	7,25	7,30	7,35	7,40	7,45	7,50	7,55	7,60	7,65	7,70	7,75	7,80	7,85	7,90	7,95	8,00	8,05	8,10	8,15	8,20	8,25	8,30	8,35	8,40	8,45
13.00	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30
13.50	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
14.00	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	
14.50	7,70	7,70	7,70	7,70	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,90	
15.00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	
15.50	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	9,20	9,20	9,20	9,50	9,50	
16.00	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,50	9,50	9,50	

GENTLE 80

CL DIA (mm)	13,00	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50	16,00
BC (mm)	7,10 - 8,90	7,10 - 9,20	7,40 - 9,50	7,70 - 9,80	8,00 - 9,80	8,30 - 9,80	8,60 - 9,80
ANPASS-REGEL: Km = (K1+K2)/2	0,0	0,0	0,1	0,3	0,5	0,7	0,9

Für eine präzisere Anpassung verwenden Sie bitte unseren Online-Kontaktlinsen-Kalkulator

Detaillierte Anpassleitfäden zur Myopie-Kontrolle und für Presbyopie-Kontaktlinsen können durch Scannen des QR-Codes aufgerufen werden.

RISING	be free [®] Day	MYLO	MYLO Night
--------	--------------------------	------	------------

Austausch	Täglich	Monatlich	Jährlich
Geometrie	MULTISTEP DESIGN	EDOF. EDOF Toric	SPH. TOR
Material	Silikonhydrogel	Silikonhydrogel	Formstabil/ gasdurchlässig

MATERIAL

ISO Klassifikation	Filcon B (91) [50%] (Toufilcon B)	Filcon 5B (60) [75%]	Hexafocon A (100) [0%] (Boston XO)
Dk (ISO 9913-1-1998)	91	60	100
Dk/t (-3.00 dpt)	114	50	-
Wassergehalt	50%	75%	-
Mittendicke (bei-3.00 dpt)	0.08	0.12	0.22
Cof	0.03	0.02	-
Modulus (MPa)	0.65	0.33	-
Dehydration	-	1%	-

PARAMETER

Kundenprofil	-	-	Myopie ≤ -5.00. Hornhautverkrümmung ≤ -1.50
Basiskurven (mm)	8.50	7.10 bis 9.80 (0.30)	6.50 bis 10.00
Durchmesser (mm)	14.20	13.50 bis 15.50 (0.50)	10.20 bis 11.20 (0.10)
Durchmesser der Optischen Zone (mm)	-	-	5.00, 5.50, 6.00, 6.60
Scheitelbrechwert (dpt)	-	-	+0.50
Sphären (dpt)	-0.50 bis -6.00 (0.25)	-0.25 bis -15.00 (0.25)	-
Zylinder (dpt)	-	-0.75 bis -8.00 (0.25)	-
Achsen (°)	-	Alle (1°)	-

MERKMALE

UV Filter	Klasse 2	Klasse 1	-
Handhabungstönung	Blau	Blau	R: Grün L: Blau
Torisch: Ein-Strich-Markierung	-	bei 6 Uhr	-
Herstellungsprozess	Moulded	Gedreht	Gedreht
Verpackungseinheit	10PK • 30PK • 90PK	3PK • 6PK	1PK

PERFORMANCE	SAPHIR ^{RX}	BLU:GEN	GENTLE ⁵⁹	GENTLE ⁸⁰
-------------	----------------------	---------	----------------------	----------------------

Austausch	Monatlich	Monatlich	Monatlich	Monatlich
Geometrie	SPH. TOR. MF. MFT	SPH. TOR. MF. MFT	SPH. TOR. MF. MFT	SPH. TOR. MF. MFT
Material	Silikonhydrogel	Silikonhydrogel	Hydrogel. ORI:GEN Technology	Hydrogel. ORI:GEN Technology

MATERIAL

ISO Klassifikation	Filcon 5B (60) [75%]	Filcon 5B (60) [75%]	Filcon 2 (30) [59%]	Filcon 2 (60) [80%]
Dk (ISO 9913-1-1998)	60	60	30	60
Dk/t (-3.00 dpt)	50	50	25	50
Wassergehalt	75%	75%	59%	80%
Mittendicke (bei-3.00 dpt)	0.12	0.12	0.12	0.12
Cof	0.02	0.05	0.05	0.06
Modulus (MPa)	0.33	0.25	0.36	0.16
Dehydration	1%	< 0.50%	< 1%	< 0.50%

PARAMETER

Basiskurven (mm)	6.80 bis 9.80 (0.30)	6.50 bis 9.80 (0.30)	7.10 bis 9.80 (0.30)	7.10 bis 9.80 (0.30)
Durchmesser (mm)	13.00 bis 16.00 (0.50)	11.50 bis 16.50 (0.50)	13.00 bis 16.00 (0.50)	13.00 bis 16.00 (0.50)
Sphären (dpt)	±30.00 (0.25)	±30.00 (0.25)	±30.00 (0.25)	±30.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)	-0.75 bis -8.00 (0.25)	-0.75 bis -8.00 (0.25)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
Achsen (°)	Alle (1°)	Alle (1°)	Alle (1°)	Alle (1°)
MF Design	CD - CN	CD - CN	CD - CN	CD - CN
Additionen (dpt)	0.50 bis 4.00 (0.50)	0.50 bis 4.00 (0.25)	0.50 bis 4.00 (0.50)	0.50 bis 4.00 (0.50)

MERKMALE

UV Filter	Klasse 1	Klasse 1	-	-
Blaulichtfilter	-	Ja	-	-
Handhabungstönung	Blau	Grün	Blau	Blau
Torisch: Ein-Strich-Markierung	bei 6 Uhr	bei 6 Uhr	bei 6 Uhr	bei 6 Uhr
Herstellungsprozess	Gedreht	Gedreht	Gedreht	Gedreht
Verpackungseinheit	3PK • 6PK	3PK • 6PK	3PK • 6PK	3PK • 6PK

PRIME	EDOF	EDOF ⁵⁹
-------	------	--------------------

Austausch	Monatlich	Monatlich
Geometrie	EDOF & EDOF Toric	EDOF & EDOF Toric
Material	Silikonhydrogel	Hydrogel. ORI:GEN Technology

MATERIAL

ISO Klassifikation	Filcon 5B (60) [75%]	Filcon 2 (30) [59%]
Dk (ISO 9913-1-1998)	60	30
Dk/t (-3.00 dpt)	50	25
Wassergehalt	75%	59%
Mittendicke (bei-3.00 dpt)	0.12	0.12
Cof	0.02	0.05
Modulus (MPa)	0.33	0.36
Dehydration	1%	< 1%

PARAMETER

Basiskurven (mm)	7.10 bis 9.80 (0.30)	7.10 bis 9.80 (0.30)
Durchmesser (mm)	13.50 bis 15.50 (0.50)	13.50 bis 15.50 (0.50)
Sphären (dpt)	±18.00 (0.25)	-18.00 bis +8.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
Achsen (°)	Alle (1°)	Alle (1°)
Additionen (dpt)	0.75 1.50 2.25	0.75 1.50 2.25

MERKMALE

UV Filter	Klasse 1	-
Handhabungstönung	Blau	-
Torisch: Ein-Strich-Markierung	bei 6 Uhr	bei 6 Uhr
Herstellungsprozess	Gedreht	Gedreht
Verpackungseinheit	3PK • 6PK	3PK • 6PK

SONSTIGE	BLU:KIDZ	BLU:SSENTIALS	BRILLIANT
----------	----------	---------------	-----------

Austausch	Monatlich	Monatlich	Monatlich
Geometrie	SPH. TOR. MF	SPH. TOR. MF	SPH. TOR. MF
Material	Silikonhydrogel	Silikonhydrogel	Silikonhydrogel

MATERIAL

ISO Klassifikation	Filcon 5B (60) [75%]	Filcon 5B (60) [75%]	Filcon 5B (60) [75%]
Dk (ISO 9913-1-1998)	60	60	60
Dk/t (-3.00 dpt)	50	50	50
Wassergehalt	75%	75%	75%
Mittendicke (bei-3.00 dpt)	0.12	0.12	0.12
Cof	0.05	0.05	0.02
Modulus (MPa)	0.25	0.25	0.33
Dehydration	< 0.50%	< 0.50%	1%

PARAMETER

Basiskurven (mm)	6.50 bis 9.80 (0.30)	8.30 bis 8.90 (0.30)	8.30 bis 8.90 (0.30)
Durchmesser (mm)	11.50 bis 16.50 (0.50)	14.00 bis 15.00 (0.50)	14.00 bis 15.00 (0.50)
Sphären (dpt)	±30.00 (0.25)	-10.00 bis +8.00 (0.25)	-10.00 bis +8.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)	-0.75 bis -2.75 (0.50)	-0.75 bis -2.75 (0.50)
Achsen (°)	Alle (1°)	Alle (10°)	Alle (10°)
MF Design	CD - CN	CD - CN	CD - CN
Additionen (dpt)	0.50 bis 4.00 (0.25)	0.50 bis 2.50 (0.50)	0.50 bis 2.50 (0.50)

MERKMALE

UV Filter	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
Blau Light Blocking	Ja	Ja	-
Handhabungstönung	Grün	Grün	Blau
Torisch: Ein-Strich-Markierung	bei 6 Uhr	bei 6 Uhr	bei 6 Uhr
Herstellungsprozess	Gedreht	Gedreht	Gedreht
Verpackungseinheit	3PK • 6PK	3PK • 6PK	3PK • 6PK

SONSTIGE	XTENSA ^{RX}	XTENSA ^{SiHy}	SEVEN ^{RX}

Austausch	Monatlich	Monatlich	Weekly
Geometrie	SPH. TOR. MF. MFT	SPH. TOR. MF	SPH. TOR. MF. MFT
Material	Hydrogel	Silikonhydrogel	Hydrogel

MATERIAL

ISO Klassifikation	Filcon 4 (19) [55%]	Filcon 5C (70) [45%]	Filcon 4 (19) [55%]
Dk (ISO 9913-1-1998)	19	70	19
Dk/t (-3.00 dpt)	19	119	19
Wassergehalt	55%	45 %	55%
Mittendicke (bei-3.00 dpt)	0.10	0.06	0.10
Cof	-	0.03	-
Modulus (MPa)	0.47	0.80	0.47

PARAMETER

Basiskurven (mm)	SPH, TOR, MF 8.50, MFT 8.70	8.60	SPH, TOR, MF 8.50, MFT 8.70
Durchmesser (mm)	14.40	14.20	14.40
Sphären (dpt)	SPH ±30.00 (0.25; 0.50 Schritte ab ±6.00) TOR, MF, MFT (0.25; 0.50 Schritte ab +4.00/-6.00)	SPH -10.00 bis +8.00 (0.50 Schritte ab ±6.00) TOR, MF -10.00 bis +6.00 (0.50 Schritte ab -6.00)	SPH ±30.00 (0.25; 0.50 Schritte ab ±6.00) TOR, MF, MFT (0.25; 0.50 Schritte ab +4.00/-6.00)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -7.75 (0.50)	-0.75 bis -2.25 (0.50)	-0.75 bis -7.75 (0.50)
Achsen (°)	Alle (5°)	Alle (10°)	Alle (5°)
MF Design	CD - CN	CD	CD - CN
Additionen (dpt)	CD +1.50/+2.50 - CN +1.25/+2.25	Low (+1.00) Medium (+1.50) High (+2.00)	CD +1.50/+2.50 - CN +1.25/+2.25

MERKMALE

UV Filter	-	Klass 1	-
Handhabungstönung	Blau	Blau	Blau
Torisch: Ein-Strich-Markierung	bei 6 Uhr	bei 6 Uhr	bei 6 Uhr
Herstellungsprozess	Gedreht	Moulded	Gedreht
Verpackungseinheit	3PK • 6PK	3PK • 6PK	12PK

SONSTIGE	EQUILIBRIA	SAPHIR	QUATTRO	SPH5 5T

Austausch	3-Monatlich	3-Monatlich	3-Monatlich Annual	Annual
Geometrie	SPH. TOR. MF. MFT	SPH. TOR. MF. MFT	SPH. TOR. MF	SPH. TOR
Material	Hydrogel	Silikonhydrogel	Hydrogel	Hydrogel

MATERIAL

ISO Klassifikation	Filcon 2 (24) [59%]	Filcon 5B (60) [75%]	Filcon 1 (15) [49%]	Filcon 2 (24) [59%]
Dk (ISO 9913-1-1998)	24	60	15	24
Dk/t (-3.00 dpt)	25	50	17	21
Wassergehalt	59%	75%	49%	59%
Mittendicke (bei-3.00 dpt)	0.12	0.12	0.09	0.14
Cof	0.07	0.04	0.09	0.07
Modulus (MPa)	0.32	0.29	0.41	0.32

PARAMETER

Basiskurven (mm)	7.70 bis 9.80 (0.30)	6.80 bis 9.80 (0.30)	Ø13.00: SPH, TOR 7.10 bis 9.20 (0.30) Ø14.00: MF 8.00 bis 9.00 (0.20) Ø14.50: SPH, TOR 7.70 bis 9.80 (0.30)	7.70 bis 9.80 (0.30)
Durchmesser (mm)	14.50	13.00 bis 16.00 (0.50)	SPH, TOR 13.00 & 14.50, MF 14.00	14.50
Sphären (dpt)	SPH, TOR ±30.00 (0.25) MF, MFT ±23.00 (0.25)	±30.00 (0.25)	SPH, TOR ±30.00 (0.25) MF -12.00 bis -1.00 / +1.00 bis +8.00 (0.25)	±30.00 (0.25)
Zylinder (dpt)	-0.75 bis -8.00 (0.25)	-0.75 bis -8.00 (0.25)	-0.75 bis -8.00 (0.25)	-0.75 bis -8.00 (0.25)
Achsen (°)	Alle (5°)	Alle (5°)	Alle (5°)	Alle (5°)
MF Design	CD - CN	CD - CN	CD - CN	-
Additionen (dpt)	1.00 bis 3.00 (0.50)	0.50 bis 4.00 (0.50)	A = SPH+: 1.00 CN SPH-: 1.00 CD B = SPH+: 1.75 CN SPH-: 2.00 CD C = SPH+: 2.50 CN SPH-: 3.00 CD	-

MERKMALE

Handhabungstönung	Blau	-	Blau	Blau
Torisch: Ein-Strich-Markierung	3 Linien bei 6 Uhr mit einem Abstand von 15°	3 Linien bei 6 Uhr mit einem Abstand von 15°	bei 6 Uhr	bei 6 Uhr
Herstellungsprozess	Gedreht	Gedreht	Gedreht	Gedreht
Verpackungseinheit	1PK • 2PK	1PK • 2PK	1PK • 2PK 1PK	1PK

KONTAKT

tel. Deutschland +49 800 447 4476 | **tel. Österreich** +43 800 123 846 | **e-mail** order@markenovy.com

CRAFTED WITH CARE IN MADRID, SPAIN

At markennovy, we are committed bis challenging the status quo of the contact lens industry through innovation, technology and a highly qualified professional team.