ULTRA DROPS

markennovy solutions

Lang anhaltende Linderung[1]

Sofortiges Wohlbefinden. Hochwertiges Hyaluronsäure-Biomolekül (0.15 %)[2]

Befeuchtet die Linsen. Verbessert den Tragekomfort



Für Menschen mit häufigen Symptomen von trockenen müden und überanstrengten Augen

Hypotonische Lösung[3]

Ohne Konservierungsstoffe[4]

Kompatibel mit Kontaktlinsen[5]


(1) Dank der Eigenschaften der in der Rezeptur enthaltenen Hyaluronsäure sorgen diese Augentropfen für eine langanhaltende Linderung der Symptome des trockenen Auges. **(2)** Die in der Rezeptur verwendete Hyaluronsäure weist ein hohes Molekulargewicht (1,6 MD) und eine geringe Polydispersität auf. **(3)** Um der übermäßigen Salzkonzentration in den Tränen bei trockenen Augen entgegenzuwirken. **(4)** Dank des OSD-Systems der Flasche. **(5)** Es befeuchtet Kontaktlinsen und kann auch während des Tragens angewendet werden. **(6)** Der OSD-Behälter schützt den Inhalt vor mikrobiologischer Kontamination von außen, da er über einen Filter verfügt, der verhindert, dass kontaminierte Luft mit dem Produkt in Kontakt kommt. Die Flüssigkeit wird durch den Tropfer unter dem Druck abgegeben, der entsteht, wenn die Seiten der Flasche zusammengedrückt werden. Sobald sich der Tropfen gebildet hat, verschließt ein interner Mechanismus das System, um zu verhindern, dass Mikroorganismen vom Tropfer in den Behälter gelangen. Der OSD-Behälter benötigt Luft, um seine ursprüngliche Form wieder anzunehmen. Diese Luft gelangt über einen seitlichen Kreislauf, der physikalisch vom Flüssigkeitsauslasskanal getrennt ist, in den Behälter und durchläuft dabei einen Sterilisationsfilter.

ULTRA DROPS


Sofortige, anhaltende Linderung



WIRKMECHANISMUS VON OSD[6]

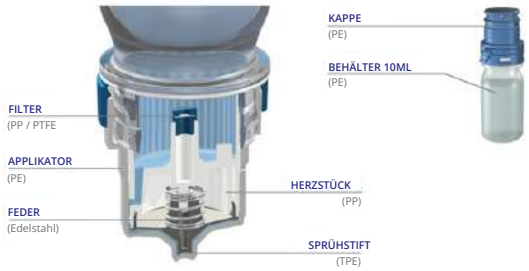



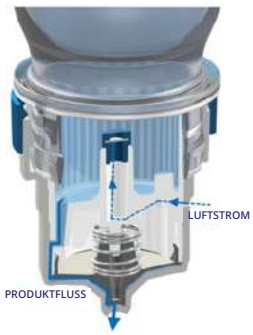

ZUSAMMENSETZUNG

INHALTSSTOFF	FUNKTION
Hyaluronsäure mit hohem Molekulargewicht (0,15 %)	Feuchtigkeitsspender
Natriumchlorid und gereinigtes Wasser	Erzeugt eine isotonische Kochsalzlösung die den natürlichen Tränen ähnelt
Dinatrium- und Mononatriumphosphat	Puffer, der einen pH-Wert gewährleistet, der dem von Tränen entspricht

markennovy solutions

Informationen zu Kontraindikationen, Warnhinweisen und möglichen Nebenwirkungen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Produkts. Diese Informationen richten sich ausschließlich an ausgebildete Fachkräfte (z.B. Augenoptiker und Augenärzte). Dieses Medizinprodukt entspricht den geltenden Rechtsvorschriften.